



PRODUCT INFORMATION UMBILICAL HERNIA CORSET




Dutch

Omschrijving: Navelbreuk korset biedt elastische compressieondersteuning voor navelbreuk en buikhernia. Het korset is voorzien van een siliconen pad met een ademende katoenen hoes.

Maatvoering:

MAAT	BUIJKOMTREK	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31423 S
M	85 - 95 cm	PO 31423 M
L	95 - 105 cm	PO 31423 L
XL	105-115 cm	PO 31423 XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31423 XXL

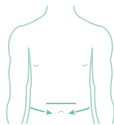

Indicaties: Navelbreuk (hernia umbilicalis), Littekenbreuk (hernia cicatricalis), Buikwandbreuk (hernia abdominalis)

Gebruiksaanwijzing:

1. Plaats het siliconen pad op de navel.
2. Zorg dat de siliconen pad op de navel gepositioneerd blijft en trek de band strak.
3. Sluit de klittenbandsluiting met de gewenste compressie voor voldoende steun

Belangrijke informatie en waarschuwingen:

Dit medische product is bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. De eerste keer dient het product door een getrainde professional aangelegd te worden.

In gevallen waarin het product door de arts wordt aangeraden om 's nachts te gebruiken, moet men er zeker van zijn dat het de bloedcirculatie niet verhindert. Het product dient losgemaakt te worden in geval van gevoelloosheid en indien nodig worden verwijderd. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.

Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of vlammen. Contact met olie- of zuurhoudende stoffen of lotions met pommes moet worden vermeden.

Dit product mag niet buiten het toepassingsgebied worden gebruikt of gecombineerd worden met een ander product. Het mag alleen worden gebruikt volgens de oorspronkelijke indicaties.

Dagelijks gebruik en toepassingsduur dienen door de arts te worden bepaald. Overmatig en langdurig gebruik kan spierzwakte veroorzaken. Raadpleeg altijd uw arts voor het juiste draagschema.

Wasinstructies:



Fabrikant: Pro Orthic | Postbus 3208 | 5203 DE 's-Hertogenbosch Nederland
+31 (0)88 0900 300 | info@pro-orthic.com | www.pro-orthic.com



PRODUCT INFORMATION UMBILICAL HERNIA CORSET




English

Description: Umbilical hernia corset provides elastic compression support for umbilical hernia and abdominal hernia. The corset features a silicone pad with a breathable cotton cover.

Sizing:

SIZING	BELLY SIZING	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31423 S
M	85 - 95 cm	PO 31423 M
L	95 - 105 cm	PO 31423 L
XL	105-115 cm	PO 31423 XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31423 XXL

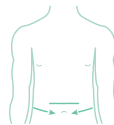

Indications: Umbilical hernia (umbilical hernia), Scar hernia (cicatricalis hernia), Abdominal wall hernia (abdominal hernia)

Manual:

1. Place the silicone pad on the navel.
2. Keep the silicone pad positioned on the navel and pull the band tight.
3. Close the Velcro closure with the desired compression for sufficient support

Important information and warnings:

This medical product is intended for use by one individual patient. The product should be used in accordance with your doctor's advice and instructions. The product should be installed by a trained professional the first time.

In cases where the product is recommended by the doctor to be used at night, it must be ensured that it does not interfere with blood circulation. The product should be detached in case of numbness and removed if necessary. Consult your doctor in case of persistent complaints.

The product should not be exposed to excessive heat or flame. Contact with oily or acidic substances or lotions containing pomades should be avoided.

This product must not be used outside its scope or combined with any other product. It should only be used according to the original indications.

Daily use and duration of application should be determined by the physician. Excessive and prolonged use can cause muscle weakness. Always consult your doctor for the correct wearing schedule.

Washing instructions:



Manufacturer: Pro Orthic | Postbus 3208 | 5203 DE 's-Hertogenbosch Nederland
+31 (0)88 0900 300 | info@pro-orthic.com | www.pro-orthic.com




INFORMATION PRODUIT UMBILICAL HERNIA CORSET



Description: Le corset pour hernie ombilicale offre un support de compression élastique pour les hernies ombilicales et les hernies abdominales. Le corset a un coussinet en silicone avec une housse en coton respirant.

Dimensionnement:

DIMENSION	TAILLE DU VENTRE	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31423 S
M	85 - 95 cm	PO 31423 M
L	95 - 105 cm	PO 31423 L
XL	105-115 cm	PO 31423 XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31423 XXL

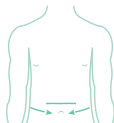

Indications: Hernie ombilicale (hernie ombilicale), Hernie cicatricielle (hernie cicatricielle), Hernie de la paroi abdominale (hernie abdominale)

Manuel d'utilisation:

1. Placez le coussinet en silicone sur le nombril.
2. Gardez le coussinet en silicone positionné sur le nombril et tirez sur la bande.
3. Fermez la fermeture Velcro avec la compression souhaitée pour un soutien suffisant

Informations importantes et avertissements:

Ce produit médical est destiné à être utilisé par un seul patient. Le produit doit être utilisé conformément aux conseils et aux instructions de votre médecin. Le produit doit être installé par un professionnel qualifié la première fois.

Dans les cas où le produit est recommandé par le médecin pour être utilisé la nuit, il faut s'assurer qu'il n'interfère pas avec la circulation sanguine. Le produit doit être détaché en cas d'engourdissement et retiré si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de plaintes persistantes.

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur ou à une flamme excessive. Le contact avec des substances huileuses ou acides ou des lotions contenant des pommades doit être évité.

Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors de son champ d'application ou combiné avec tout autre produit. Il ne doit être utilisé que selon les indications d'origine.

L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être déterminées par le médecin. Une utilisation excessive et prolongée peut provoquer une faiblesse musculaire. Consultez toujours votre médecin pour connaître le calendrier de port correct.

Instructions de lavage:




PRODUKTINFORMATION UMBILICAL HERNIA CORSET



die Umschreibung: Das Nabelbruchkorsett bietet eine elastische Kompressionsunterstützung bei Nabelbruch und Bauchhernie. Das Korsett verfügt über ein Silikonpolster mit einem atmungsaktiven Baumwollbezug.

die Bemessung:

GRÖSSE	BAUCHUMFANG	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31423 S
M	85 - 95 cm	PO 31423 M
L	95 - 105 cm	PO 31423 L
XL	105-115 cm	PO 31423 XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31423 XXL

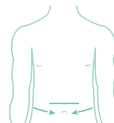

Indikationen: Nabelbruch (Nabelbruch), Narbenbruch (Cicatricialis Hernie), Bauchwandbruch (Bauchbruch)

Gebrauchsanweisung:

1. Legen Sie das Silikonpad auf den Nabel.
2. Halten Sie das Silikonpolster am Nabel positioniert und ziehen Sie das Band fest.
3. Schließen Sie den Klettverschluss mit der gewünschten Kompression für ausreichend Halt

Wichtige Informationen und Warnungen:

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Anweisungen Ihres Arztes verwendet werden. Das Produkt sollte beim ersten Mal von einem geschulten Fachmann installiert werden.

Im Falle das Produkt vom Arzt zur nächtlichen Anwendung empfohlen wird, Sie achten, dass

es die Durchblutung nicht beeinträchtigt. Bei Taubheitsgefühl sollte das Produkt abgenommen und bei Bedarf entfernt werden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt sollte keiner übermäßigen Hitze oder Flamme ausgesetzt werden. Der Kontakt mit öligen oder sauren Substanzen oder pomadenhaltigen Lotionen sollte vermieden werden.

Dieses Produkt darf nicht außerhalb seines Geltungsbereichs verwendet oder mit anderen Produkten kombiniert werden. Es sollte nur gemäß den Originalindikationen verwendet werden.

Die tägliche Anwendung und die Anwendungsdauer sollten vom Arzt festgelegt werden. Übermäßiger und längerer Gebrauch kann Muskelschwäche verursachen. Fragen Sie immer Ihren Arzt nach dem richtigen Trageplan

Waschanleitung:

